





Der erste gerade Treppenlift ohne Zahnstange

Handicare 1100	Abmessungen
A Schwenkradius	655 mm
B Mindestabstand Wand bis Innenseite Rückenlehne	60mm
C Sitztiefe	390mm
D Mindestdiefe bei eingeklappter Fußstütze	280mm
E Mindestdiefe bei ausgeklappter Fußstütze	530mm
F Abstand zwischen den Armlehnen (Außen)	575mm
G Abstand zwischen den Armlehnen (Innen)	450mm
H Sitzlehnenhöhe	400mm
I Abstand Fußstütze zu Sitzhöhe	430-520mm
J Mindesthöhe Fußstütze	70mm
K Mindestens benötigter Platz der Schiene	160mm
Maximale Traglast	30-45° - 140kg 46-50° - 130kg

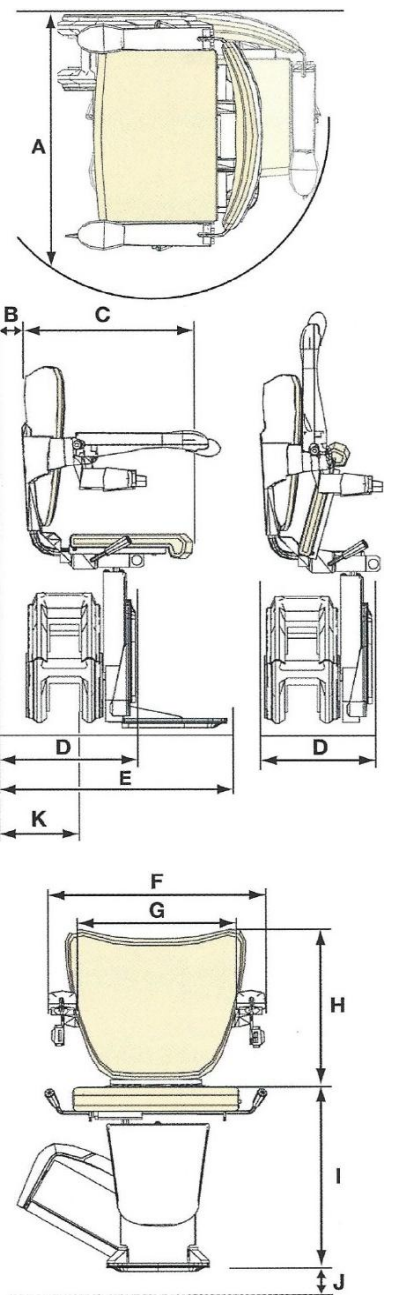

Einige der oben angegebenen Maße richten sich nach der Situation der Treppe im Haus. Alle Informationen wurden nach Treu und Glauben zur Verfügung gestellt, sie stellen jedoch keine Garantie dar. Handicare behält sich das Recht vor, Designs und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

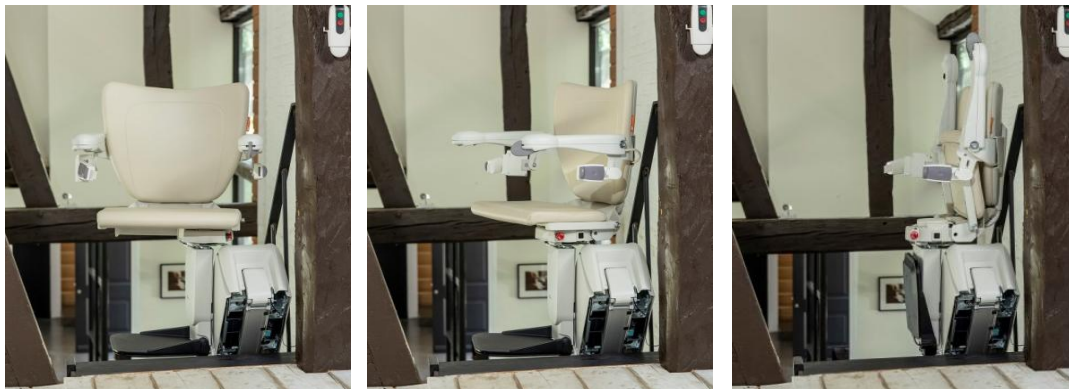


Die Benutzung des Stuhles ist denkbar einfach:

Zum Holen oder Schicken den  Aufwärts- oder  Abwärts-Knopf Ihrer Fernbedienung gedrückt halten, bis der Lift sein Ziel erreicht hat. Am Ende der Armlehne befindet sich der Bedienehebel des Stuhles, so dass Sie sich beim Hinsetzen und Aufstehen ungehindert abstützen können. Den Bedienehebel einfach in die Richtung gedrückt halten, in die Sie fahren möchten. Mit einer kurzen Verzögerung setzt sich der Lift sanft in Bewegung.



Die **schmalste** Treppenlift-Schiene ist gleichzeitig die **sicherste**:


Weil sie keine Zahnschiene hat, kann man sich ohne Verletzungsgefahr darauf abstützen. Außerdem muss sie nicht gefettet oder geölt werden. Dafür ist sie leicht sauber zu halten.

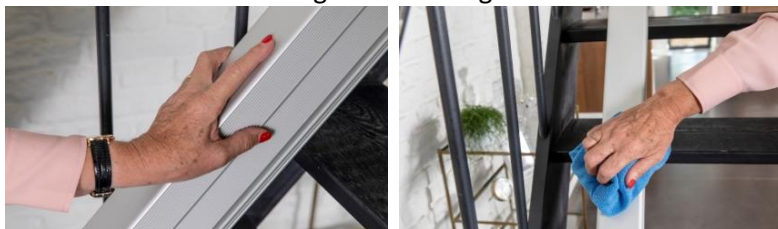

Vierrad-Antrieb:

4 Motoren sorgen für eine sichere Fahrt auf der Profilschiene.

Kupferleitung für den Ladestrom der Akkus.

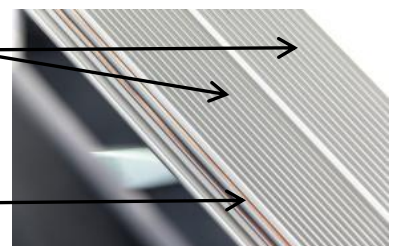

Der erste gerade Treppenlift ohne Zahnstange